


CRP a proteinové kalibrátory

Návod k použití

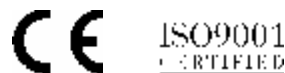

Pro diagnostické použití *in vitro*.

Kat. č.	Položka	Objem
68090	Souprava CRP kalibrátorů	5 x 1 ml
68099	CRP kalibrátor	1 ml
67261	Souprava proteinových kalibrátorů	5 x 1 ml
67913	Proteinový kalibrátor	2 ml

Reagencie obsahují azid sodný, čtěte „Upozornění a varování“.

Určený účel použití

CRP kalibrátory a proteinové kalibrátory firmy Orion Diagnostica jsou určeny pro kalibraci testů, určených k měření specifických proteinů imunoturbidimetricky.

Pracovní postup

Kalibrátory používejte podle návodu k použití pro test.

Příprava

CRP kalibrátory a proteinové kalibrátory jsou připraveny k použití.

Skladování

Neotevřené kalibrátory jsou stabilní do data expirace jsou-li skladovány při 2...8°C. Všechny lahvičky, u kterých by se projevovaly známky mikrobiálního růstu, zlikvidujte.

Hodnoty kalibrátorů

CRP kalibrátor a souprava CRP kalibrátorů mají hodnoty vyznačené na lahvičkách. Hodnota proteinového kalibrátoru a hodnoty proteinových kalibrátorů u souprav jsou vtištěny na zvláštním listě a jsou specifické pro šarži.

Návaznost

CRP kalibrátory a proteinové kalibrátory jsou standardizovány proti CRM 470 jako referenčnímu materiálu.

Upozornění a varování

Reagencie obsahují < 0,1% azidu sodného jako konzervační činidlo.

Azid sodný uvolňuje toxický plyn, pokud je v kontaktu s kyselinami.

Azid sodný může reagovat s kovovými uzávěry za tvorby explozivních azidů příslušných kovů. Tvorbě azidů lze předejít tím, že při likvidaci reagentů opláchnete materiály velkým množstvím vody.

Doporučujeme, aby všechny použité materiály a reagencie byly před likvidací autoklávovány (1 hod při 121°C).

Kalibrátory obsahují materiál lidského původu, který byl testován a shledán negativním na HCV, HBsAg a protilátky proti HIV 1 a 2. Přesto s reagensiemi zacházejte jako s materiálem schopným přenášet infekční agens.

Vysvětlení symbolů použitých na štítcích

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

IVD

Katalogové číslo

REF

Číslo šarže

LOT

Teplotní rozmezí: skladujte při teplotě 2...8°C



Použitelné do



Obsah

CONT

Obsahuje azid sodný

CONT NAN₃

Reagencie

REAG

Kalibrátor

CAL

Kalibrátor # (1-5)

CAL #

Původ lidský

ORIG HUM

Výrobce:

Orion Diagnostica Oy
P.O. Box 83, FIN-02101 Espoo, Finland
tel. +358-10-42 995; fax. +358-10-429 2794
www.oriondiagnostica.fi

Sídlo v ČR:

Orion Diagnostica-organizační složka
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel. 233 350 533
E-mail: orion@oriondiagnostica.cz
www.oriondiagnostica.cz

Originální příbalová informace:

36080-2

Datum poslední revize textu:

24.2.2005